

Product name: Bathtub grab bar
Item No: 696560 v001: 11/04/2025

3PAGEN

GB INSTRUCTION MANUAL

Please read and retain these instructions for future reference


GB - INSTRUCTION MANUAL

Product description with safety information

- Provides support to assist the user getting in and out of the bath.
- Rail handle is angled over the bath.
- Easily fixes to the bath with rubber-lined clamps to prevent marking.
- Handle height adjustable between: 62.5 - 82.5 cm (24.5 - 32.5 inch).
- Suitable for use with most baths, base plate fixes to floor.

DISPOSAL



- 3PAGEN use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

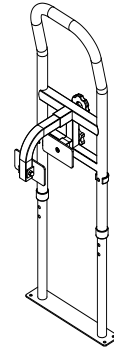

Assembly Instruction

Part List

①		X1
②		X1
③		X1
④		X1
⑤		X2
⑥		X4
⑦		X4

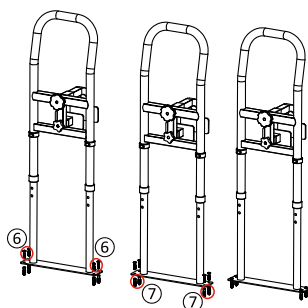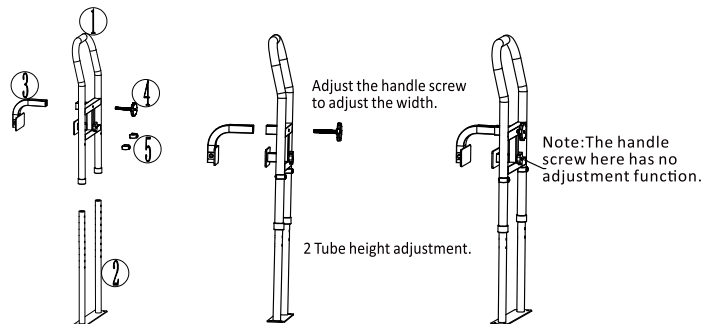

After assembling the entire product, fix the iron plate at the bottom of the product to the ground outside the bathtub. Mark the four holes of the iron plate on the ground, each with a diameter of 6 mm and a depth of 30mm, and then knock the four ⑥ plastic plugs into the holes. Then align the holes of the iron plate with the holes on the ground, and use a hexagonal wrench to insert the ⑦ self-tapping screws through the iron plate into the plastic plugs. Tighten the screws until the iron plate is fixed, and then tighten all four holes.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



Product name: Bathtub grab bar
Item No: 696560 v001: 11/04/2025

3PAGEN


DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG

Produktbeschreibung mit Sicherheitshinweisen

- Unterstützt den Benutzer beim Ein- und Aussteigen.
- Der Haltegriff ist über der Badewanne abgewinkelt.
- Einfache Befestigung mit gummierten Klemmen an der Badewanne, um Abdrücke zu vermeiden.
- Höhenverstellbarer Griff zwischen 62,5 und 82,5 cm (24,5–32,5 Zoll).
- Passend für die meisten Badewannen; Bodenplatte wird am Boden befestigt.

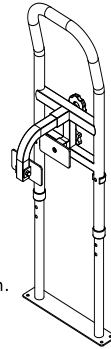



ENTSORGUNG

- 3PAGEN verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons in Übereinstimmung mit den Recyclingvorschriften Ihrer Gemeinde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung.

Montageanleitung


Teilleiste

①		X1
②		X1
③		X1
④		X1
⑤		X2
⑥		X4
⑦		X4

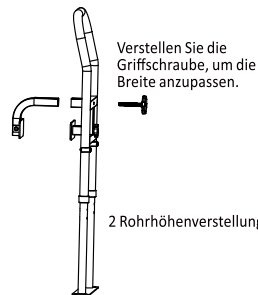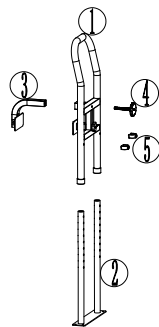


Verstellen Sie die
Griffschraube, um die
Breite anzupassen.

2 Rohrhöhenverstellung.

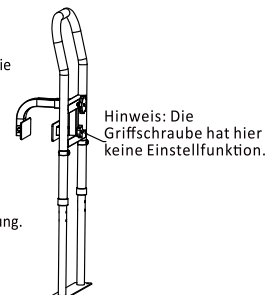

Hinweis: Die
Griffschraube hat hier
keine Einstellfunktion.

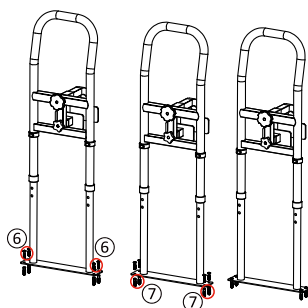

Nach der Montage des gesamten Produkts befestigen Sie die Eisenplatte an der Unterseite des Produkts am Boden außerhalb der Badewanne. Markieren Sie die vier Löcher der Eisenplatte am Boden (jeweils 6 mm Durchmesser und 30 mm Tiefe) und schrauben Sie die vier Kunststoffdübel (⑥) in die Löcher. Richten Sie die Löcher der Eisenplatte an den Löchern im Boden aus und schrauben Sie die selbstschneidenden Schrauben (⑦) mit einem Sechskantschlüssel durch die Eisenplatte in die Kunststoffdübel. Ziehen Sie die Schrauben fest, bis die Eisenplatte befestigt ist, und ziehen Sie anschließend alle vier Löcher fest.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



Product name: Bathtub grab bar
Item No: 696560 v001: 11/04/2025

3PAGEN


FR Mode d'emploi

Veuillez lire et conserver ces instructions pour toute référence ultérieure

FR - Mode d'emploi

Description du produit avec consignes de sécurité

- Fournit un soutien pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire.
- La poignée de la barre est inclinée au-dessus de la baignoire.
- Se fixe facilement à la baignoire grâce à des pinces recouvertes de caoutchouc pour éviter les marques.
- Hauteur de la poignée réglable entre 62,5 et 82,5 cm (24,5 et 32,5 pouces).
- Convient à la plupart des baignoires, la plaque de base se fixe au sol.

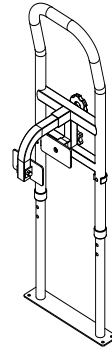



RECYCLAGE

- 3PAGEN utilise dans la mesure du possible des emballages recyclables ou recyclés.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers et cartons conformément aux règles de recyclage de votre commune.
- En fin de vie du produit, veuillez vous renseigner sur son élimination auprès des centres de recyclage des déchets ménagers agréés par l'administration communale.

Instructions de montage


Liste des pièces

①		X1
②		X1
③		X1
④		X1
⑤		X2
⑥		X4
⑦		X4

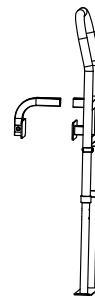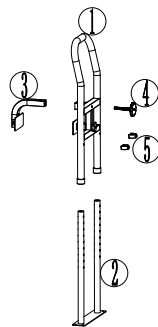


Ajustez la vis de la poignée pour ajuster la largeur.

2 Réglage de la hauteur du tube.

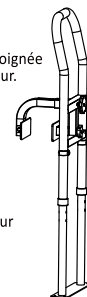

Remarque : la vis de la poignée n'a pas de fonction de réglage.

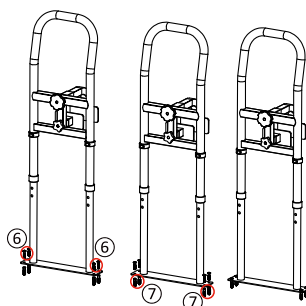

Après avoir assemblé l'ensemble, fixez la plaque de fer située sous le produit au sol, à l'extérieur de la baignoire. Marquez les quatre trous de la plaque de fer au sol, chacun d'un diamètre de 6 mm et d'une profondeur de 30 mm, puis insérez les quatre chevilles en plastique ⑥ dans les trous. Alignez ensuite les trous de la plaque de fer avec ceux du sol et, à l'aide d'une clé hexagonale, insérez les vis autotaraudeuses ⑦ dans les chevilles en plastique. Serrez les vis jusqu'à ce que la plaque de fer soit fixée, puis serrez les quatre trous.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



Product name: Bathtub grab bar
Item No: 696560 v001: 11/04/2025

3PAGEN

CZ Návod k použití

Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití


CZ- NÁVOD K POUŽITÍ

Popis výrobku s bezpečnostními pokyny

- Poskytuje oporu pro snadnější nastupování a vystupování uživatele z vany.
- Madlo je nakloněno nad vanou.
- Snadno se upevňuje k vaně pomocí gumových svorek, které zabraňují zanechávání šmouh.
- Výška madla je nastavitelná v rozmezí: 62,5–82,5 cm (24,5–32,5 palce).
- Vhodné pro použití s většinou van, základní deska se upevňuje k podlaze.

DISPOZICE



- 3PAGEN používá recyklovatelné nebo recyklované obaly, pokud je to možné.
- Veškeré obaly, papír a kartony likvidujte v souladu s předpisy místních úřadů o recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v recyklačním středisku pro domácí odpad, které má oprávnění místního úřadu.

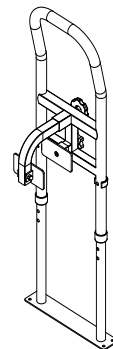

Návod k montáži


Seznam dílů

①		X1
②		X1
③		X1
④		X1
⑤		X2
⑥		X4
⑦		X4

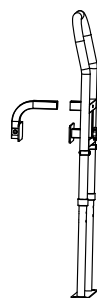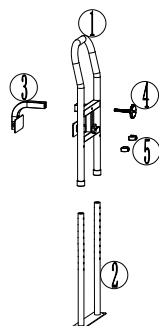


Šířku upravte pomocí šroubu rukojeti.

2 Nastavení výšky trubky.

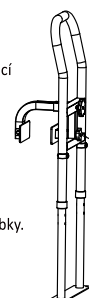

Poznámka: Šroub rukojeti zde nemá žádnou funkci nastavení.

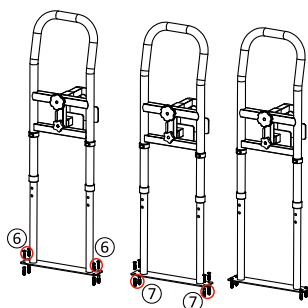

Po sestavení celého výrobku připevněte železnou desku ve spodní části výrobku k zemi vně vany. Označte si na zemi čtyři otvory v železné desce, každý o průměru 6 mm a hloubce 30 mm, a poté do nich zatlučte čtyři plastové zátky (6). Poté zarovnejte otvory v železné desce s otvory v zemi a pomocí šestihranného klíče zasuňte samořezné šrouby (7) skrz železnou desku do plastových zátek. Utahujte šrouby, dokud není železná deska upevněna, a poté utáhněte všechny čtyři otvory.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de



Product name: Bathtub grab bar
Item No: 696560 v001: 11/04/2025

3PAGEN

SK Návod na použitie

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie


SK - NÁVOD NA POUŽITIE

Popis výrobku s bezpečnostnými pokynmi

- Poskytuje oporu a pomáha používateľovi pri nastupovaní a vystupovaní z vane.
- Rukoväť je naklonená nad vaňou.
- Ľahko sa pripieňuje k vani pomocou svoriek s gumenou výstelkou, aby sa zabránilo zafarbeniu.
- Výška rukoväte je nastaviteľná v rozmedzí: 62,5 – 82,5 cm (24,5 – 32,5 palca).
- Vhodné pre použitie v väčšine vaní, základná doska sa pripieňuje k podlahe.

DISPOZÍCIA


- Spoločnosť 3PAGEN používa recyklovateľné alebo recyklované obaly, ak je to možné.
- Všetky obaly, papier, kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych orgánov o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v miestnom recyklačnom stredisku pre domový odpad, ktoré je autorizované miestnym úradom.

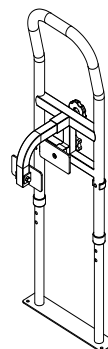

Návod na montáž


Zoznam dielov

①		X1
②		X1
③		X1
④		X1
⑤		X2
⑥		X4
⑦		X4

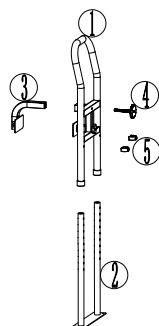


Nastavte skrutku rukoväte, aby ste nastavili šírku.

2 Nastavenie výšky trubice.

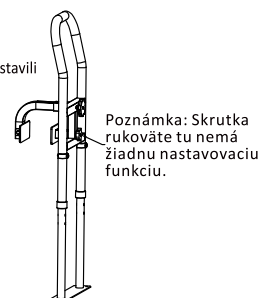

Poznámka: Skrutka rukoväte tu nemá žiadnu nastavovaciu funkciu.

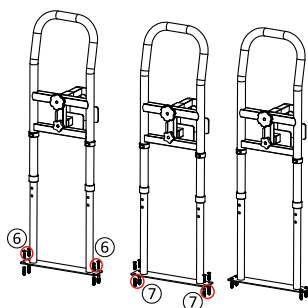

Po zostavení celého výrobku pripievňte železnú dosku v spodnej časti výrobku k zemi mimo vane. Označte štyri otvory v železnej doske na zemi, každý s priemerom 6 mm a hĺbkou 30 mm, a potom do otvorov zatlačte štyri plastové zátky (⑥). Potom zarovnajte otvory v železnej doske s otvormi na zemi a pomocou imbusového kľúča zasunite samorezné skrutky (⑦) cez železnú dosku do plastových zátok. Uťahnite skrutky, kým nie je železná doska upevnená, a potom utiahnite všetky štyri otvory.

Distributed by / Hergestellt für /

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf

Tel: +49 (0) 2404/980-204

Customer Services: kontakt@3pagen.de

Web Site: www.3pagen.de

