


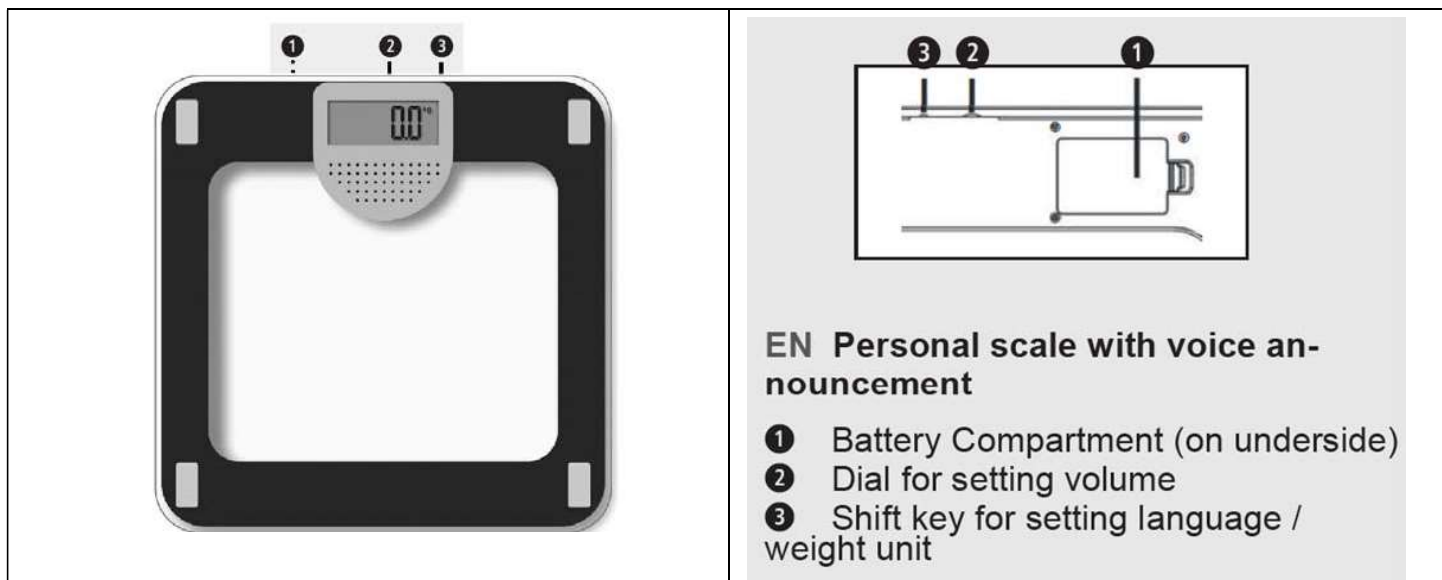

Insert/replace battery:

Before you start up your digital scale, insert the three provided 1.5V batteries(type AAA) into the device. To do this, open the battery compartment ① beneath the device and insert the batteries.

Change the batteries when the battery change symbol “Lo” appears in the display or when nothing is shown in the display after the device is switched on

Weighing:

1. Step onto the scales and stand still. The device switches on automatically and the display briefly show , 0.0kg
2. Your weight is measured, flashes twice and is then finally displayed
3. Step down from the scales. The scales switch off automatically after 10 seconds.

Change unit of weight:

Shortly press your foot on the middle of the scale surface. “0.0” , appears in the display. You now may select the weight units (kg – lb) with the shift key for setting the weight unit ③. Press and hold the key!

The scales have a measuring range up to 180kg (396lb). Do not overload the scales.

Change language:

Shortly press your foot on the middle of the scale surface. “0.0” appears in the display. With the shift key ③ for setting the language you may select the desired language for the audio output:

German(DE),English(GB),French(FR),Spanish(ES). Press the key multiple times.


Error messages:

Lo = The batteries are low and need to be replace.

Err = Check whether the batteries have been inserted correctly.

- Check whether the correct unit of weight has been selected.
- Check whether the scales are freestanding on a solid and even surface. They must not be touching a wall or any other object.
- Weight yourself again

O-Ld = The scale is overloaded

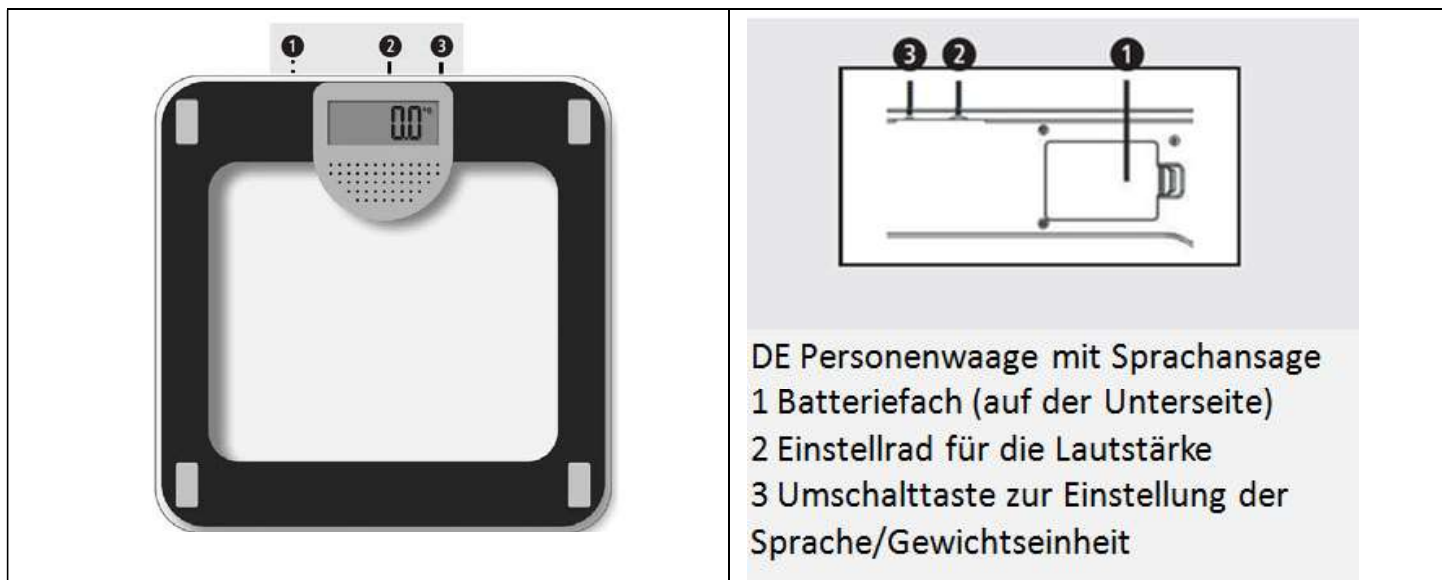

Batterie einlegen/auswechseln:

Bevor Sie Ihre Digitalwaage in Betrieb nehmen, legen Sie die drei mitgelieferten 1,5-V-Batterien (Typ AAA) in das Gerät ein. Öffnen Sie dazu das Batteriefach an der Unterseite des Geräts und legen Sie die Batterien ein. Wechseln Sie die Batterien, wenn das Batteriewechselsymbol "Lo" in der Anzeige erscheint oder wenn nach dem Einschalten des Gerätes keine Anzeige erscheint.

Wiegen:

1. Treten Sie auf die Waage und bleiben Sie stehen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und in der Anzeige erscheint kurz , 0.0kg
2. Ihr Gewicht wird gemessen, blinkt zweimal und wird dann endgültig angezeigt
3. Treten Sie von der Waage herunter. Die Waage schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch ab.

Ändern Sie die Gewichtseinheit:

Drücken Sie kurz mit dem Fuß auf die Mitte der Waagenfläche. In der Anzeige erscheint "0.0". Mit der Umschalttaste zur Einstellung der Gewichtseinheit können Sie nun die Gewichtseinheiten (kg - lb) auswählen. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt!

Die Waage hat einen Messbereich bis zu 180kg (396lb). Überlasten Sie die Waage nicht.

Sprache wechseln:

Drücken Sie kurz mit dem Fuß auf die Mitte der Waagenfläche. In der Anzeige erscheint "0.0". Mit der Umschalttaste für die Spracheinstellung können Sie die gewünschte Sprache für die Audioausgabe auswählen: Deutsch(DE),Englisch(GB),Französisch(FR),Spanisch(ES). Drücken Sie die Taste mehrmals.

Fehlermeldungen:

Lo = Die Batterien sind schwach und müssen ausgetauscht werden.

Err = Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt wurden.

- Prüfen Sie, ob die richtige Gewichtseinheit gewählt wurde.
- Prüfen Sie, ob die Waage frei auf einer festen und ebenen Fläche steht. Sie darf weder eine Wand noch einen anderen Gegenstand berühren.
- Wiegen Sie sich erneut

O-Ld = Die Waage ist überlastet



Osobní váha CZE s hlasovou výzvou

1 přihrádka na baterie (na spodní straně)

2 Kolečko pro nastavení hlasitosti

3 Přepínací tlačítko pro nastavení jazyka/jednotky hmotnosti

Vložte/vyměňte baterii:

Před spuštěním digitální váhy vložte do přístroje tři dodané 1,5V baterie (typ AAA). Za tímto účelem otevřete přihrádku na baterie pod zařízením a vložte baterie.

Baterie vyměňte, jakmile se na displeji objeví symbol výměny baterií "Lo" nebo když se po zapnutí zařízení na displeji nic nezobrazí.

Vážení:

1. Stoupněte si na váhu a zůstaňte stát. Zařízení se automaticky zapne a na displeji se krátce zobrazí , 0,0 kg.
2. Vaše hmotnost se změří, dvakrát zabliká a poté se konečně zobrazí na displeji
3. Sestupte z váhy. Po 10 sekundách se váha automaticky vypne.

Změňte jednotku hmotnosti:

Krátce stiskněte nohu uprostřed povrchu váhy. Na displeji se zobrazí "0,0" ,. Nyní můžete zvolit jednotky hmotnosti (kg - lb) pomocí tlačítka pro nastavení jednotky hmotnosti . Stiskněte a podržte klávesu !

Váha má rozsah měření až do 180 kg (396 lb). Váhu nepřetěžujte.

Změňte jazyk:

Krátce stiskněte nohu uprostřed povrchu váhy. Na displeji se zobrazí "0,0". Pomocí tlačítka pro posun nastavení jazyka můžete zvolit požadovaný jazyk pro zvukový výstup: Němčina (DE), angličtina (GB), francouzština (FR), španělština (ES). Tlačítko stiskněte vícekrát.



Chybová hlášení:

Lo = Baterie jsou vybité a je třeba je vyměnit.

Err = Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.

- Zkontrolujte, zda byla zvolena správná jednotka hmotnosti.
- Zkontrolujte, zda váha stojí volně na pevném a rovném povrchu. Nesmí se dotýkat zdi ani žádného jiného předmětu.
- Znovu se zvážít

O-Ld = Váha je přetížena.

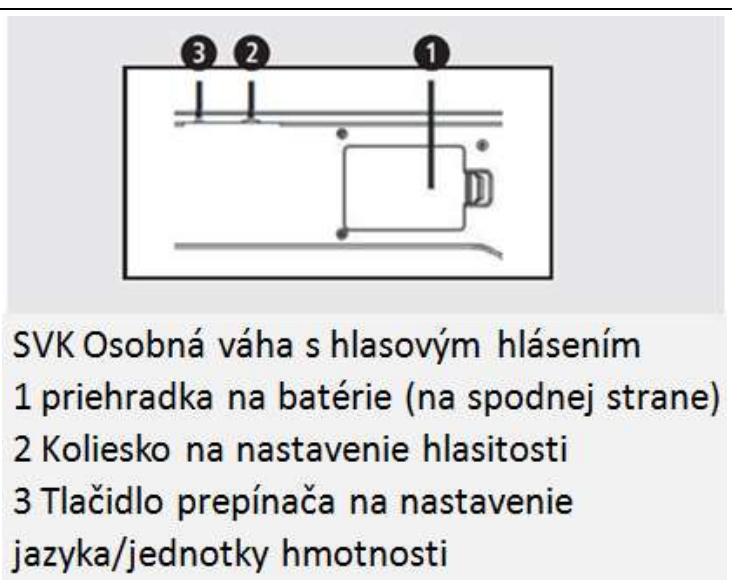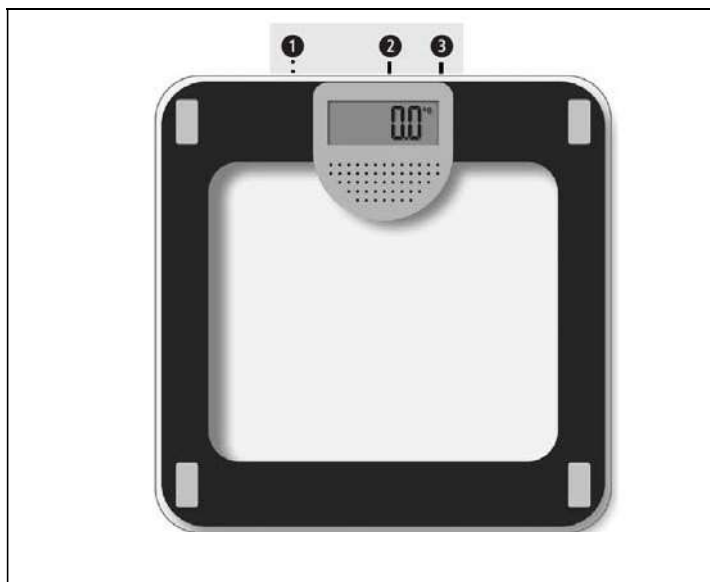

Vložte/vymeňte batériu:

Pred spustením digitálnej váhy vložte do zariadenia tri dodané 1,5 V batérie (typ AAA). Na tento účel otvorte priehradku na batérie pod zariadením a vložte batérie.

Batérie vymeňte, keď sa na displeji zobrazí symbol výmeny batérií "Lo" alebo keď sa po zapnutí zariadenia na displeji nič nezobrazí.

Váženie:

1. Stúpnite si na váhu a zostaňte stáť. Zariadenie sa automaticky zapne a na displeji sa nakrátko zobrazí , 0,0 kg.
2. Vaša hmotnosť sa zmeria, dvakrát zabliká a nakoniec sa zobrazí
3. Zostúpte z váhy. Váha sa po 10 sekundách automaticky vypne.

Zmena jednotky hmotnosti:

Krátko stlačte nohu na stred povrchu váhy. Na displeji sa zobrazí "0,0" ,. Teraz môžete vybrať jednotky hmotnosti (kg - lb) pomocou tlačidla Shift pre nastavenie jednotky hmotnosti . Stlačte a podržte tlačidlo! Váha má rozsah merania do 180 kg (396 libier). Váhu nepreťažujte.

Zmena jazyka:

Krátko stlačte nohu na stred povrchu váhy. Na displeji sa zobrazí "0,0". Pomocou tlačidla posunu pre nastavenie jazyka môžete vybrať požadovaný jazyk pre zvukový výstup: Nemčina (DE), angličtina (GB), francúzština (FR), španielčina (ES). Stlačte tlačidlo viackrát.

Chybové hlásenia:

Lo = batérie sú vybité a je potrebné ich vymeniť.

Err = Skontrolujte, či boli batérie vložené správne.

- Skontrolujte, či bola zvolená správna jednotka hmotnosti.
- Skontrolujte, či váha stojí voľne na pevnom a rovnom povrchu. Nesmú sa dotýkať steny ani žiadneho iného predmetu.
- Opätovne sa odvážte

O-Ld = Váha je preťažená