

REF: 70500

Nastavitelný bederní pás

Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Návod k použití



Specifikace produktu a velikosti

K dispozici ve třech velikostech pro optimální přizpůsobení.


Velikost	Obvod pasu	Hmotnost
S / M	74 cm – 99 cm (29" – 39")	170g
L / XL	99 cm – 127 cm (39" – 50")	190g
2XL / 3XL	127 cm – 152 cm (50" – 60")	210g

Nastavitelné popruhy

Materiál: 80 % polyester, 10 % polyamid, 10 % elastan

Vnitřní část: karton, PU pěna

Pokyny k nasazení

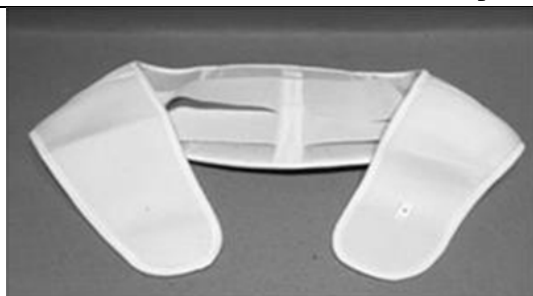

1. Zcela otevřete pás a rozeptejte suché zipy.



2. Umístěte černý panel na vnitřní stranu pásu tak, aby nejširší část směřovala dolů.



3. Oviňte pás kolem pasu.



4. Utáhněte pás a zajistěte jej pomocí suchých zipů.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ

- Čistěte pouze lokálně nebo otřete vlhkým hadříkem.
- Neponořujte do vody.

LIKVIDACE

- Veškeré obalové materiály, jako je papír, kartony, plasty a plastové sáčky, likvidujte v souladu s místními předpisy pro recyklaci.
- Po skončení životnosti výrobku jej odevzdejte na autorizovaném sběrném místě pro recyklaci komunálního odpadu.

REF: 70500

Ceinture de soutien lombaire réglable

Notice d'utilisation

Veuillez lire attentivement et conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure.



Caractéristiques du produit et dimensions


Disponible en trois tailles pour un ajustement optimal:

Taille	Tour de taille	Poids
S / M	74 cm – 99 cm (29" – 39")	170g
L / XL	99 cm – 127 cm (39" – 50")	190g
2XL / 3XL	127 cm – 152 cm (50" – 60")	210g

Sangles réglables

Matériaux : 80 % polyester, 10 % polyamide, 10 % élasthanne
Intérieur : carton, mousse PU

Instructions de mise en place

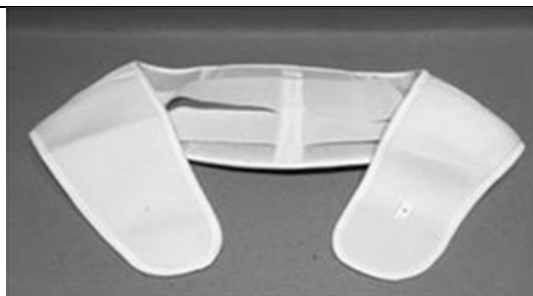

1. Ouvrez complètement la ceinture en détachant les bandes auto-agrippantes.



2. Positionnez le panneau noir à l'intérieur de la ceinture, avec la partie la plus large vers le bas.



3. Enroulez la ceinture autour de votre taille.



4. Serrez la ceinture et fixez-la à l'aide des bandes auto-agrippantes.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- Nettoyer localement uniquement ou essuyer avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger dans l'eau.

ÉLIMINATION

- Éliminez les matériaux d'emballage tels que le papier, les cartons, les plastiques et les sacs plastiques conformément aux réglementations locales de recyclage.
- En fin de vie, déposez le produit dans un centre de recyclage agréé pour les déchets ménagers.

REF: 70500

Verstellbarer Rückenstützgürtel für die Lendenwirbelsäule

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung auf.

Gebrauchsanweisung



Produktspezifikationen und GrößenDer


Stützgürtel ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, um eine optimale Passform zu gewährleisten:

Größe	Taillenumfang	Gewicht
S / M	74 cm – 99 cm (29" – 39")	170g
L / XL	99 cm – 127 cm (39" – 50")	190g
2XL / 3XL	127 cm – 152 cm (50" – 60")	210g

Verstellbare Gurte

Material: 80 % Polyester, 10 % Polyamid, 10 % Elasthan
Innen: Karton, PU-Schaum

Anlegeanleitung

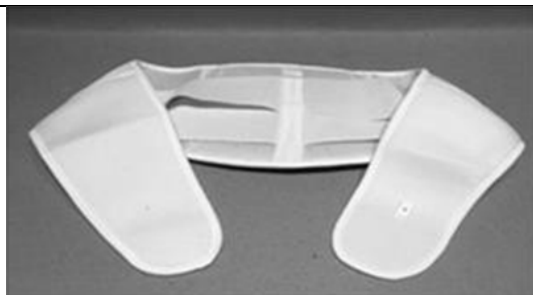

1. Öffnen Sie den Gürtel vollständig und lösen Sie die Klettverschlüsse.



2. Positionieren Sie das schwarze Panel so, dass es sich auf der Innenseite des Gürtels befindet, wobei der breiteste Teil nach unten zeigt.



3. Legen Sie den Gürtel um Ihre Taille.



4. Ziehen Sie den Gürtel fest und fixieren Sie ihn mit den Klettverschlüssen.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- Nur punktuell reinigen oder mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht in Wasser eintauchen.

ENTSORGUNG:

- Entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier, Kartons, Kunststoffe und Plastiktüten gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei einer autorisierten Sammelstelle für Haushaltsabfälle.

REF: 70500

Nastaviteľný bedrový pás

Prečítajte si tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

Návod na použitie



Špecifikácie produktu a veľkosti

Dostupné v troch veľkostiach pre optimálne prispôbenie.


Veľkosť	Obvod pásu	Hmotnosť
S / M	74 cm – 99 cm (29" – 39")	170g
L / XL	99 cm – 127 cm (39" – 50")	190g
2XL / 3XL	127 cm – 152 cm (50" – 60")	210g

Nastaviteľné popruhy

Materiál: 80 % polyester, 10 % polyamid, 10 % elastan

Vnútorňá časť: kartón, PU pena

Pokyny na nasadenie

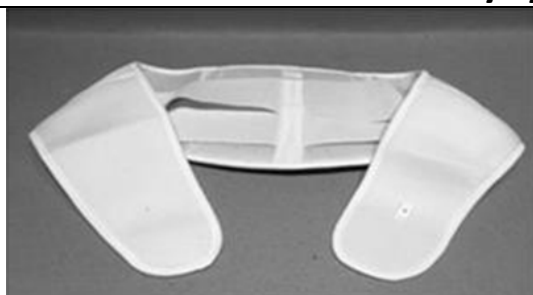

1. Úplne rozopnite pás a uvoľnite suché zipsy.



2. Umiestnite čierny panel na vnútornú stranu pásu tak, aby najširšia časť smerovala nadol.



3. Oviňte pás okolo pásu.



4. Utiahnite pás a zaistite ho pomocou suchých zipsov.

POKYNY NA ÚDRŽBU A ČISTENIE

- Čistite iba lokálne alebo utrite vlhkou handričkou.
- Neponárajte do vody.

LIKVIDÁCIA


- Všetky obalové materiály, ako sú papier, kartóny, plasty a plastové tašky, likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku ho odovzdajte na autorizovanom zbernom mieste pre recykláciu komunálneho odpadu.

REF: 70500

Adjustable Lumbar Back Support Belt

Please read and retain these instructions for future reference

Instruction for Use

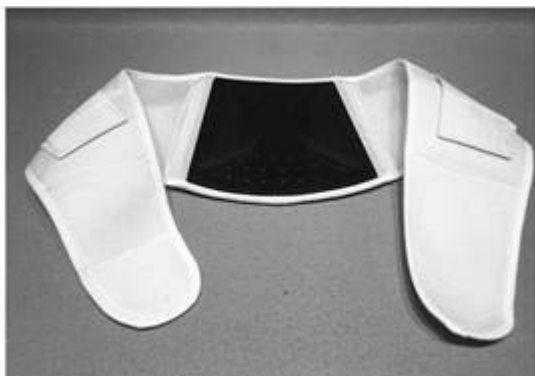

Product Specifications and Sizes


The support belt is available in three different sizes to ensure an optimal fit:

Size	Waist Circumference	Weight
S / M	74 cm – 99 cm (29" – 39")	170g
L / XL	99 cm – 127 cm (39" – 50")	190g
2XL / 3XL	127 cm – 152 cm (50" – 60")	210g

Adjustable Straps

Material: 80 % Polyester, 10 % Polyamide, 10 % Elastic
Inner: Carboard, PU-Foam

Fitting instruction

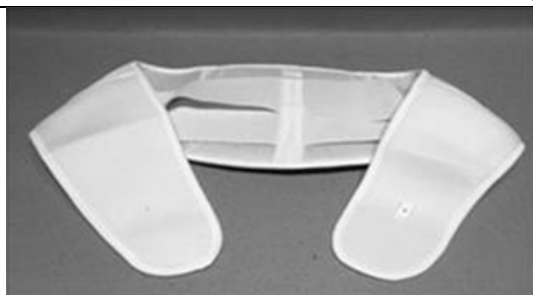

1. Open up the belt fully, undoing the hooks and loops



2. Position the black panel to sit on the inside of the belt with the widest part down



3. Wrap belt around your waist.



4. Tighten belt and hold in place on hook and loop panels.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- Spot clean or wipe clean only. Do not immerse in water.

DISPOSAL

- Dispose of all packaging, paper, cartons, plastic and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please dispose of it at an authorised household waste recycling centre.